

注意事項

カラダの信号、かんたんチェック！！

取扱説明書

管理医療機器 単回使用自動ランセット

かんたん採血セット‘栄研’

※採血を行う前に本書をよくお読みください。


- 1 出血性疾患や薬剤服用などにより止血機能が低下している方は使用しないこと
- 2 穿刺器具は感染の危険があるため繰り返し使用や複数人での共用はしないこと
- 3 穿刺器具(2個)は使用、未使用にかかわらず検体チューブとともに返送すること
- 4 穿刺器具は分解しないこと
- 5 穿刺器具は小児に使用しないこと
- 6 本製品は使用目的以外に使わないこと
- 7 本製品は、子供の手の届かない場所に保管すること
- 8 採血は清潔で水平な場所で行うこと
- 9 輸送中に血液がもれないよう、輸送用キャップ(白色)でしっかりフタをすること
- 10 採血した部分が化膿した場合は医師に相談すること
- 11 穿刺器具は、使用する前に保護キャップを外して先端部分を何かに押し付けてしまうと針が作動してしまい使用できなくなるので注意すること
- 12 本製品をご使用になる際は、「かんたん遠心機EC-10」が必要です

セット内容をご確認ください

再使用禁止



付属品

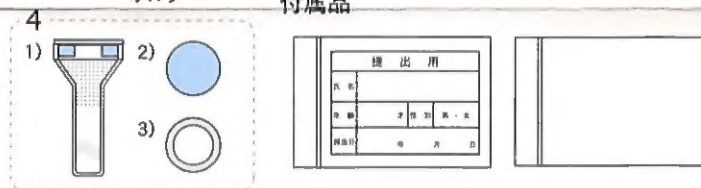

おことわり

- ・採血量不足・採血不備により、全項目の検査ができない場合があります。
- ・採血時、検体チューブに異物(唾液など)が混入すると検査に影響が出る場合があります。

検体チューブはそのままお使いください

1. 穿刺器具	2個
2. 絆創膏	1枚
3. 消毒布	1枚
4. 検体チューブ	1個
1) チューブ本体 パッド入り中栓(水色)がしてあります。 ※ゲル状の物質が入れてあります。 そのままお使いください。	1個
2) 遠心用キャップ(水色)	1個
3) 輸送用キャップ(白色)	1個

付属品：検体チューブ返送用ポリ袋(印刷あり)
穿刺器具等返送用ポリ袋(印刷なし)

お願い

ご使用前に
裏面の「注意事項」
をよくお読み
ください。

よく読んで手順どおりに進めてください。

カラダの信号、かんたんチェック！！

1

外箱からトレイを取り出し、検体チューブをトレイのチューブ立てにセットします。
検体チューブは中栓をはずさずそのままお使いください。



2

血行を良くするため必ず流水(温水)で手を温め、マッサージしながらよく洗います。
※果物等の糖分を含む食品などに触れた後、そのまま指先から採血すると指に付着した糖分が血液と混じり、血糖値が偽高値となるおそれがあります。



3

採血する指先を消毒布で拭きます。




4

採血する指のつけ根を指先に向けて赤くなるまで絞ります。
(消毒した部分には触れないでください。)



5

穿刺器具の保護キャップをねじって引っぱってホルダーから外して下さい。

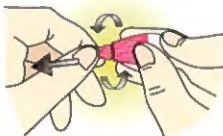

6

消毒した部分が乾いていることを確認し、ホルダーを指で持ち(この時先端が少し引っ込みます)カチッと音がなるまで押し付けます。音がしたらすぐ離します。
※カチッと音がなるまで押し付けます。




7

立つか、膝を立てた姿勢で、指の腹を下に向け心臓より低い位置で指のつけ根から指先に向けて絞ります。
絞る動作を2〜3回繰り返します。



8

出てきた血液4〜5滴を検体チューブ上部のパッドにたらし、全体が赤くなるまでしみ込ませます。
※指先をパッドにごすりつけず、血液をたらしってください。

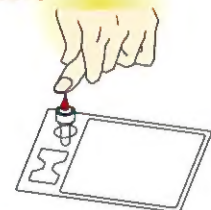

9

刺した部分に絆創膏を貼ってください。



10

採血後はすみやかに検体チューブに遠心用キャップ(水色)をしっかりとめてください。



11

検体チューブを遠心機にかけます。
(遠心機の操作については添付文書をお読みください。)



12

検体チューブを遠心機より取り出し、遠心用キャップ(水色)と中栓を一緒にはずします。
(中栓がはずれない場合は再度キャップをし、必ず中栓をはずしてください。)



13

検体チューブに輸送用キャップ(白色)でしっかりフタをします。



14

さらに検体チューブをさかさまにし、平らなテーブルにギュッと押しつけます。



15


輸送中に検体がもれないよう、輸送用キャップ(白色)が正しくできていることを確認します。



16

血液がもれると検査ができなくなりますので十分ご注意ください。

完成図

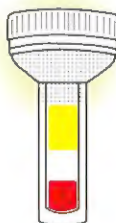

17

ポリ袋の記名欄に氏名など必要事項を記入し、検体チューブを入れチャックを閉めます。外箱にも同様に氏名など必要事項を記入します。印刷のないポリ袋に、穿刺器具(2個)・遠心用キャップ(水色)・中栓を入れてチャックを閉めます。

18

図のように、トレイの所定の位置にそれぞれのポリ袋を入れ、トレイごと外箱に収納します。提出するまで冷暗所(冷蔵庫)に保管します。提出方法は別紙をご参照ください。



